


エトワール専用 微弱電流ローラーヘッド 【日本製】

エトワールに接続して手袋の代用としてご利用いただけます。

微弱電流ヘッドローラー

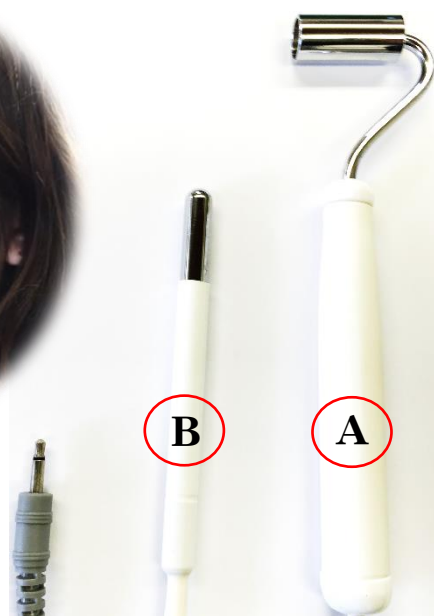

(写真1)



オプション価格 (税込) 16,200 円

安全上の警告と注意

エトワールの取扱説明書をご確認ください。

ご使用方法

1. 本体に電子ローラーのプラグをどちらか片方に差し込んでください。(写真1)
2. 電源ボタンを押し、「美顔」のモードを選択してください。
3. 出力を6~10まで上げてください。
4. アース棒(B)を顔の任意の箇所に当て、目的の部位に軽くローラー(A)を当て、変えたい方向に転がしてください。
(注) 転がすことによって金属音が発生しますが、効果・機能に全く問題はありません。

ご使用頻度の目安

当初2ヶ月は週3回程度(1回15分)でご使用いただき、それ以降は数週間に1度のペースでも若々しい顔を維持できるようになります。

お手入れ方法

アース棒およびローラー棒の金属部分を消毒してください。

電子ローラーの使い方のコツ

棒の方は握って使ってもいいですが、ローラーの近い位置に触れた方が電気の効率は良いです。

顔の右側を施術しているときは、左のこめかみ辺りに…

左を施術しているときは、右のこめかみ辺りに当てておくとツボへの刺激もあって成果が上がりやすいと思います。

触れる程度で構いません。ゆっくり転がしてください。

おでこは中心から外側に横に転がしましょう。

それ以外の場所は基本、あごから上に向けて弧を描くように転がします。

下記のイラストのとおりに行うと間違いのないと思います。

1回 15分です。続けて使っても構いません。

